



# Certum<sup>®</sup> diagnostic

## Test de diagnóstico rápido



- ✓ **Fáciles de utilizar**, una gota de muestra es suficiente
- ✓ **Rápidos**, resultados en 5 – 10 minutos
- ✓ **No requieren equipamiento especial**
- ✓ **Se conservan a temperatura ambiente**

**König Lab, S.L.**  
C/ Guifrè el Pilòs, 1D  
08213 Polinyà  
España.

[www.certum.vet](http://www.certum.vet)

 **König**

# Certum diagnóstico veterinario



**Leishmania infantum Ab**  
Detección rápida de anticuerpos anti Leishmania

**Muestras:** sangre, suero o plasma

**Presentación:** estuches conteniendo 5, 10 o 50 tests

## Moquillo canino

Detección rápida del antígeno del Paramixovirus causante del moquillo canino.

**Muestra:** suero, plasma, orina, exudado nasal i ocular, saliva

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests



## FeLV

Detección rápida del antígeno P27 del virus de la Leucemia felina

**Muestras:** sangre, suero o plasma

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests

## FeLV + FIV

Detección rápida y combinada del antígeno P27 del virus de la Leucemia felina y de anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia felina.

**Presentación:** estuches conteniendo 6, 10, 25 o 50 tests

## Ehrlichia

Detección rápida de anticuerpos anti Ehrlichia canis

**Muestras:** sangre, suero o plasma

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests

## CPV + CCoV

Detección rápida y simultánea del antígeno viral del Parvovirus canino y del Coronavirus canino

**Muestra:** heces

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests

## Parvovirus canino

Detección rápida del antígeno viral del Parvovirus canino

**Muestra:** heces o vómitos

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests

## Dirofilariasis

Detección rápida de antígenos circulantes de Dirofilaria immitis

**Muestras:** sangre, suero o plasma

**Presentación:** estuches conteniendo 5, 10 o 25 tests




## Giardia

Detección rápida de Giardia duodenalis

**Muestras:** Heces

**Presentación:** estuches conteniendo 5 o 10 tests

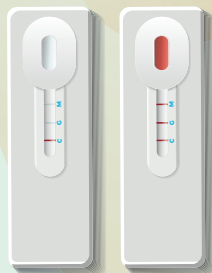

**Test de diagnóstico rápido**

# diffvet

Tinción rápida de frotis sanguíneo e improntas por el método de May Grünwald-Giemsa modificado.



## Método de coloración versátil

Hematología, parasitología (detección de parásitos intracelulares o extracelulares), espermología y cito-bacteriología

**Tiempo de ejecución:** menos de un minuto



**Presentación:** Kit de 3 x 100 ml



- Recambio fijador 100 ml y 1000 ml
- Recambio eosina 100 ml y 1000 ml
- Recambio azul B 100 ml y 1000 ml

## Modo de empleo:

- 1 Sumerja el frotis 5 veces 1 segundo en la solución I. Escorra el exceso sobre un papel filtro.
- 2 Sumerja el frotis 5 veces 1 segundo en la solución II. Escorra el exceso sobre un papel filtro. (no lave)
- 3 Sumerja el frotis 5 veces 1 segundo en la solución III. Lave inmediatamente con agua destilada o desmineralizada.



**Resultado rápido y preciso**